


# 제품설명서

제품명(국문)	전동 틸트테이블		
제품명(영문)	Electric Tilt Table		
모델명	Conble 104A	제조원	한국, (주)광원메디텍 社

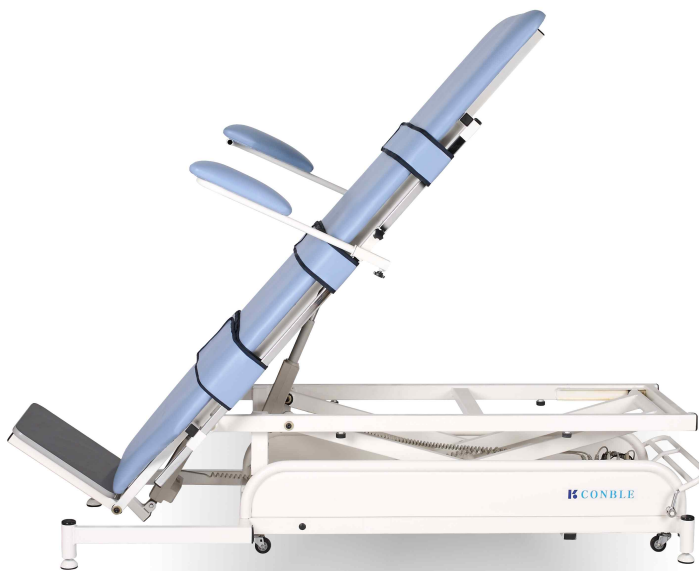

## 《용 도》

- 직립감각기능 유지, 하지근 톤유지
- 하지근력강화
- 장기 외상환자의 체위 변환

## 《특 징》

- 저소음 저진동 전동 모터 구동방식
- 전동 실린더에 의한 테이블 상·하 높이 조절
- X형 Moving 방식으로 상하조절시 테이블의 전·후 이동이 없음
- 안전높이 감지센서 내장으로 기립시 바닥에 닿을 위험이 없음.
- 좌우 발판 각도 (0~200°) 전동조절 가능
- 좌우분리형 Arm rest 부착, 최저높이 48cm
- 원터치 방식에 의한 장비이동과 고정
- 전동실린더에 의한 테이블 경사기립 각도조절(0°~90°)

\* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

## 《사 양》

- 규 격 : 2000 × 700 × 480~930mm (가로×세로×높이)
- 각 도 : 0° ~ 90°
- 무 게 : 120kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, Hand Switch, Arm rest 2EA, 고정용 벨트 3EA