


# 제품설명서

제품명(국문)	2단 전동테이블		
제품명(영문)	2 Stage Electric Table		
모델명	CONBLE NS2	제조원	한국, (주)광원메디텍 社

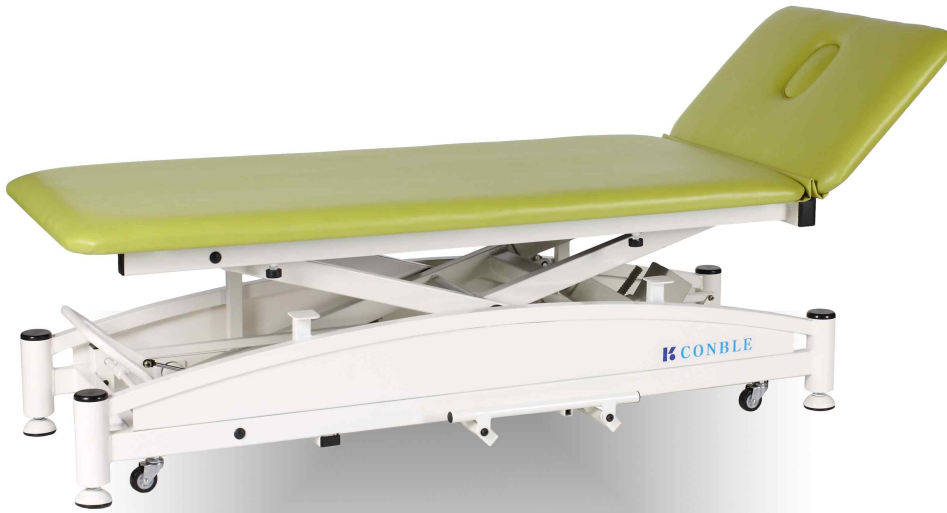

## 《용 도》

- 정형 물리 치료용 테이블
- 높낮이 자동으로 조절
- 환자의 치료 자세를 바르게 하고 치료사가 정확한 치료기법을 사용하게 한다

## 《특 징》

- 저소음, 저진동 전동모터 구동방식
- 전동 실린더에 의한 테이블 상/하 높이 조절
- 가스 쇼바에 의한 머리부분 각도 조절(-90°~40°)
- 페이스홀 및 페이스홀 마개
- X형 Moving방식으로 상하조절시 테이블의 전/후 이동이 없음
- 원터치 방식 이동 및 고정 장치 부착
- 버튼형 핸드스위치와 원터치형 풋스위치를 동시사용

## 《사 양》

- 규 격 : 2000 x 700 x 460~900mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 80kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 작 동 : Hand Switch, Foot Switch
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, Hand Switch, Foot Switch
- 옵션 : Bar Switch